



Mes mots

Tout ce que fait l'application, et comment s'en servir

L'application de l'enfant, et l'espace qui vous est réservé. Chaque page montre un écran tel qu'il apparaît sur la tablette, et les gestes à faire dessus.

Rien de technique. Tout se fait du doigt.

Ce que vous trouverez ici

- | | | | |
|----|----------------------------|----|----------------------------|
| 1 | L'écran de l'enfant | 13 | L'écran « J'ai mal » |
| 2 | Entrer dans votre espace | 14 | Changer de page |
| 3 | Les trois onglets | 15 | Enchaîner les mots |
| 4 | Ce qu'il a dit aujourd'hui | 16 | Le volume et l'appui |
| 5 | Montrer ou cacher un mot | 17 | La forme de la grille |
| 6 | Modifier un mot | 18 | Sauvegarder |
| 7 | Mettre une photo | 19 | Restaurer |
| 8 | Mettre votre voix | 20 | Imprimer les planches |
| 9 | Ajouter un mot | 21 | Mettre à jour |
| 10 | Déplacer un mot | 22 | Tout effacer |
| 11 | Supprimer un mot | 23 | Quand quelque chose cloche |
| 12 | Les contextes | 24 | Préparer la tablette |

Si vous ne lisez qu'un chapitre, lisez le 18

Tout ce que vous créez ici vit uniquement sur cette tablette. Il n'y a pas de compte, pas de serveur, personne d'autre n'en a de copie. Le fichier de sauvegarde est la seule chose qui protège le travail de l'enfant.


1. L'écran de l'enfant

C'est ce qu'il voit en allumant la tablette. Il touche une case, la tablette dit le mot, et le mot s'écrit en haut.



En haut la phrase qu'il vient de dire. En dessous ses mondes. Au milieu ses mots.

Une case

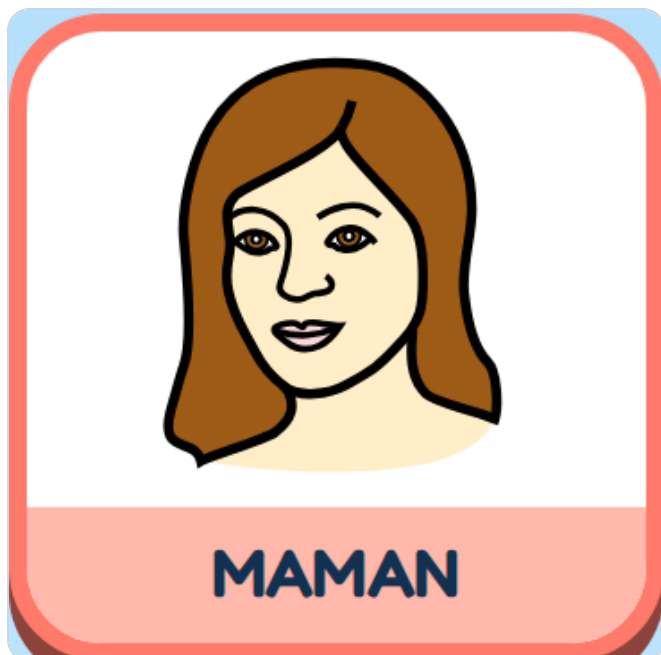

Boire

Le mot dit s'affiche en haut, avec son dessin.

L'image occupe la case entière, le mot est écrit dessous.

La case s'anime pendant que son mot est dit : elle grandit un peu et pousse un anneau de sa couleur. C'est le seul mouvement de l'écran, et il répond toujours à son doigt.

La règle qui ne se discute pas

Une case ne change jamais de place. l'enfant ne lit pas : il apprend où sont ses mots. Montrer un mot, en cacher un, en ajouter un, en supprimer un, rien de tout cela ne déplace les autres. C'est vrai partout dans l'application, et vous pouvez donc modifier sans crainte.


2. Entrer dans votre espace

Toute la première rangée de l'écran répond, celle où s'écrit la phrase : la bande blanche et le bleu qui l'entoure, sur toute la largeur. L'enfant n'y a aucune case.

- 1 Posez le doigt n'importe où sur cette rangée et **maintenez 3 secondes**, sans bouger. Une barre bleue se remplit pour vous dire que c'est parti.
- 2 Une addition apparaît. **Choisissez la bonne réponse**, tout simplement.
- 3 Votre espace s'ouvre.



Six réponses. L'addition change à chaque fois.

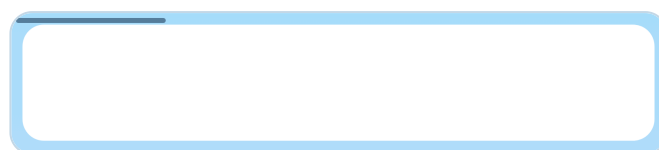

Le haut de l'écran pendant l'appui : la barre bleue se remplit en trois secondes.

Si vous vous trompez, l'écran de l'enfant revient et la rangée ne répond plus pendant **vingt secondes**. C'est voulu : sans cette pause, un enfant qui tapote au hasard finirait par entrer. Le bouton **Annuler** referme la question sans répondre.

Il n'y a aucun code à retenir

L'addition change à chaque fois, et l'ordre des réponses aussi. C'est justement ce qui protège votre espace : L'enfant vous verra faire ce geste des centaines de fois au fil des années, et il ne pourra pas le refaire en se souvenant d'une position, puisqu'il faudrait faire le calcul.

Pour ressortir : le bouton **Terminé**, en haut à droite.


3. Les trois onglets

Chaque onglet répond à une question, et cette question est son titre.



Les mots	Qu'est-ce qu'il peut dire ? C'est là qu'on arrange son monde, tous les jours si on veut : montrer un mot, en modifier un, le déplacer, en ajouter un.
Sauvegarde	Est-ce que son travail est à l'abri ? Ce qu'il y a sur la tablette, le fichier de sauvegarde, la restauration, l'impression, et tout en bas l'effacement complet.
Réglages	Comment la tablette se comporte ? Le volume, l'appui, l'écran de l'enfant, la forme de la grille, et la version de l'application.

Rien de ce qui est rare ou grave ne s'affiche à côté des mots : on ne met pas le grave sous le doigt du quotidien.

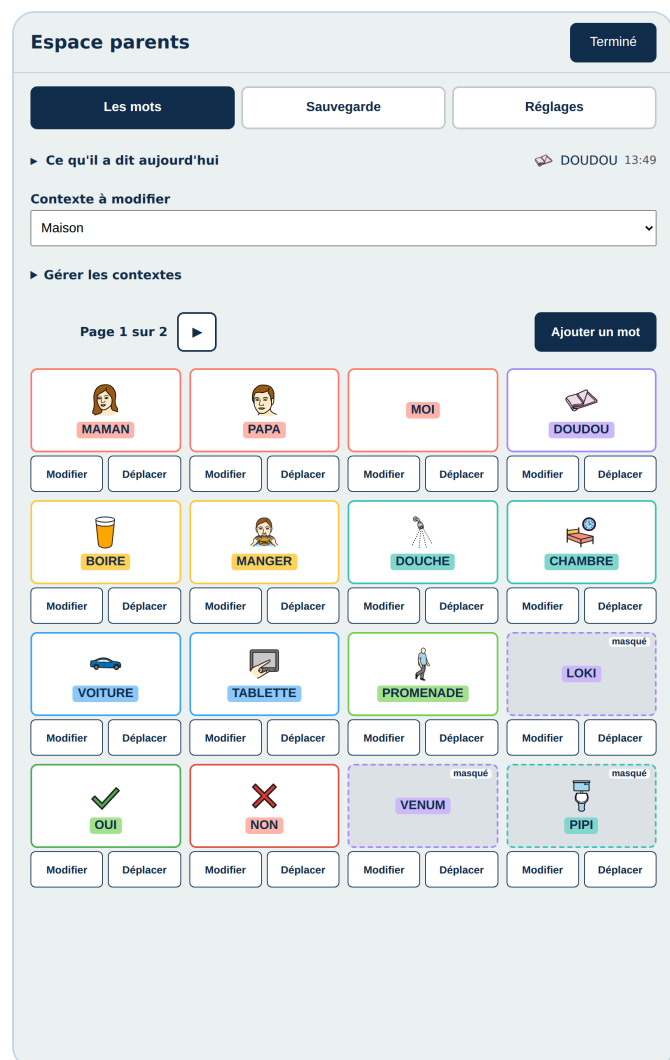

L'onglet « Les mots », là où votre espace s'ouvre.

4. Ce qu'il a dit aujourd'hui

En haut de l'onglet « Les mots », cette ligne se déploie sur tout ce que l'enfant a demandé depuis ce matin. Repliée, elle montre déjà son dernier mot et son heure.

▼ Ce qu'il a dit aujourd'hui		 DOUDOU 13:49
Vers 13 h		
	DOUDOU	13:49
	BOIRE	13:49
	MAMAN	13:49


Du plus récent au plus ancien, par heure.

La liste se vide toute seule chaque nuit. Rien ne s'accumule, et il ne se constitue aucun dossier sur lui. Il n'y a ni compte, ni score, ni statistique, c'est volontaire. Si la tablette est restée éteinte, la liste de la veille disparaît au premier démarrage.


5. Montrer ou cacher un mot

Tous les mots sont préparés d'avance, mais l'enfant ne voit que ceux que vous montrez. On en révèle un quand il est prêt pour lui.

- 1 Onglet **Les mots**. Choisissez le monde à modifier dans la liste déroulante en haut.
- 2 La grille apparaît avec **tous** les mots, y compris ceux qu'il ne voit pas encore.
- 3 Appuyez sur un mot pour changer son état.
- 4 **Terminé** pour revenir à son écran.

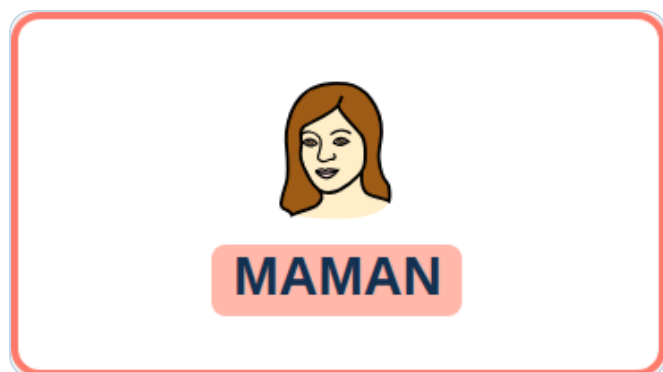

Montré : fond blanc, cadre plein, aucune mention.

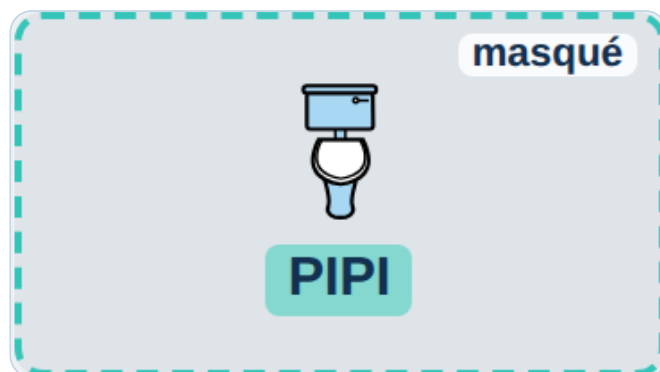

Caché : fond gris, cadre en pointillés, mention « masqué ».

Seule l'exception est écrite : un mot normal ne porte aucune étiquette. Le changement est enregistré tout de suite, il sera encore là après avoir éteint la tablette.

6. Modifier un mot

Sous chaque mot, le bouton **Modifier** ouvre un panneau à deux colonnes : ce que l'enfant voit, ce que l'enfant entend.

Modifier ce mot ×

Ce que l'enfant voit
Le mot écrit sur la case

Que montre cette case ?

☒ **Une image**



Prendre une photo

Choisir une photo

☐ **Le mot en grand, sans image**

Couleur de la case

Personnes

Enchaîner ce mot avec un autre

Enregistrer

Supprimer cette case

Ce que l'enfant entend
Le texte affiché en haut de l'écran

Qui parle pour ce mot ?

☒ **Une voix enregistrée**

▶ 0:00 / 0:00

🔊 ⋮

Enregistrer au micro

Choisir un fichier

☐ **La tablette lit le texte**

Vous pouvez y changer :

- le mot écrit sur la case, 14 lettres au maximum,
- l'image, ou le choix de ne pas en mettre,
- la couleur de la case,
- la phrase que la tablette dit à voix haute,
- la voix qui la dit,
- le mot utilisé pour enchaîner, dans le repli du bas (voir le chapitre 15).

Le mot et la phrase à dire sont obligatoires : sans phrase, la case resterait muette. Un message apparaît si l'un des deux manque, et rien n'est enregistré tant que ce n'est pas corrigé. **Enregistrer** pour garder, la croix en haut à droite pour tout laisser comme avant. Si vous aviez commencé à modifier quelque chose, une question vous le confirme avant de fermer.

La couleur



Les couleurs ne sont pas décoratives : elles rangent les mots par famille. Les personnes ensemble, la nourriture ensemble, les actions ensemble.

Choisissez celle qui correspond au sens du mot, pas celle que vous préférez.

7. Mettre une photo

Dans **Modifier**, la première question est « **Que montre cette case ?** »

Que montre cette case ?

☒ **Une image**



Prendre une photo

Choisir une photo

☐ **Le mot en grand, sans image**

- 1 **Prendre une photo** ouvre l'appareil photo de la tablette.
- 2 **Choisir une photo** ouvre les photos déjà sur l'appareil.
- 3 La photo apparaît aussitôt en aperçu, dans une case dessinée comme celle que l'enfant verra.
- 4 **Enregistrer**.

Que montre cette case ?

☒ **Une image**



Prendre une photo

Choisir une photo

☐ **Le mot en grand, sans image**



Et la case, telle qu'il la verra.

L'aperçu, tout de suite après avoir choisi.

La photo est réduite automatiquement à la bonne taille, et remise à l'endroit si la tablette l'avait tournée. Vous n'avez rien à régler. Elle remplit la case entière et perd donc un peu de ses bords : cadrez le visage au milieu.

Une vraie photo vaut souvent mieux qu'un dessin

Pour les personnes, les objets familiers et les lieux, c'est le visage de sa mère que L'enfant reconnaît, pas un pictogramme.

L'autre choix, « **Le mot en grand, sans image** », écrit le mot sur toute la case. Elle n'est jamais laissée vide.

8. Mettre votre voix

Toujours dans [Modifier](#), la seconde question : « **Qui parle pour ce mot ?** »

Qui parle pour ce mot ?

☒ **Une voix enregistrée**

▶ 0:00 / 0:00

🔊 ⋮

Enregistrer au micro

Choisir un fichier

☐ **La tablette lit le texte**

Le lecteur au-dessus fait entendre la voix actuellement en place.

- 1 Appuyez sur [Enregistrer au micro](#). La tablette demande l'autorisation du micro la première fois. Acceptez, elle ne la redemandera plus.
- 2 Parlez, puis appuyez de nouveau pour arrêter.
- 3 **Écoutez-vous.** Si ça ne va pas, [Recommencer](#) et vous repartez à zéro.
- 4 [Enregistrer](#) pour valider le mot.

[Choisir un fichier](#) sert si le son a été fait ailleurs, sur un téléphone par exemple. La tablette vérifie que c'est bien un son avant de l'accepter, quel que soit son nom, et le refuse s'il dépasse deux mégaoctets, ce qui est déjà très long pour un mot.

Ou laisser la tablette lire

Qui parle pour ce mot ?

☐ **Une voix enregistrée**

Enregistrer au micro **Choisir un fichier**

☒ **La tablette lit le texte**

Écouter

La tablette lira le texte avec sa propre voix.

La voix de synthèse de l'appareil dit ce que vous avez écrit. **Écouter** vous fait entendre exactement ce que l'enfant entendra.

Remplacer, c'est remplacer

Les voix livrées avec l'application sont une préconfiguration, pas un état où l'on revient. Tant que vous n'enregistrez rien, elles parlent. Le jour où vous enregistrez la vôtre sur un mot, elle remplace la précédente, et il n'y a pas de bouton pour faire marche arrière.

Conseil d'enregistrement

Une pièce calme, plus près du micro que vous ne le croyez, et dites la phrase entière plutôt que le mot seul. C'est la phrase que l'enfant entendra, et c'est elle qui doit sonner naturelle.

9. Ajouter un mot

Dans la grille, les emplacements encore vides portent un bouton . Appuyez dessus pour créer un mot exactement à cet endroit.



Un
emplacement
libre.

Le panneau qui s'ouvre est le même qu'au chapitre 6 : le mot, l'image, la couleur, la phrase, la voix.

Le nouveau mot apparaît tout de suite pour l'enfant, à l'endroit choisi, sans déplacer aucun des mots déjà là.

Si la page que vous avez sous les yeux est pleine, le bouton , sous la grille, vous emmène sur la première page qui a de la place et vous invite à toucher l'emplacement voulu. S'il n'y a de place nulle part dans ce monde, il vous le dit au lieu de vous laisser chercher.

10. Déplacer un mot

Sous chaque mot, le bouton **Déplacer**. Un bandeau apparaît en haut, et toutes les places deviennent des cibles.

Espace parents

Terminé

Les motsSauvegardeRéglages

Touchez la place de DOUDOU, sur cette page ou sur une autre. Sur un mot déjà posé, les deux échangent leur place ; personne d'autre ne bouge. Ce mot est déjà affiché : L'enfant le cherchera à son ancienne place.

Annuler

► Ce qu'il a dit aujourd'hui

Contexte à modifier

Maison

► Gérer les contextes

Page 1 sur 2

Ajouter un mot

MAMAN	PAPA	MOI	DOUDOU
BOIRE	MANGER	DOUCHE	CHAMBRE
VOITURE	TABLETTE	PROMENADE	LOKI
OUI	NON	VENUM	PIPI

Touchez la place de DOUDOU, sur cette page ou sur une autre. Sur un mot déjà posé, les deux échangent leur place ; personne d'autre ne bouge. Ce mot est déjà affiché : L'enfant le cherchera à son ancienne place.

Annuler

Touchez une place vide pour y poser le mot, ou un autre mot pour les échanger.

À faire avec précaution

Si le mot déplacé est déjà montré à l'enfant, l'application vous prévient : **il le cherchera à son ancienne place**. Déplacer un mot qu'il connaît revient à déranger sa mémoire. Déplacer un mot encore caché ne coûte rien.

11. Supprimer un mot

Dans `Modifier`, tout en bas, un bouton rouge `Supprimer cette case`. Une question vous demande de confirmer, en rappelant le mot concerné.

DOUDOU sera supprimée. Son emplacement restera vide et aucune autre case ne bougera.

Annuler

Confirmer la suppression

Une fois supprimé, l'emplacement reste vide exprès, et aucune autre case ne bouge. C'est la même règle que partout ailleurs : L'enfant ne doit jamais chercher un mot connu ailleurs que là où il l'a toujours vu.

Et le rattraper

DOUDOU a été supprimé.

Annuler

Un bandeau apparaît avec un bouton `Annuler`. Appuyez dessus tant qu'il est affiché, et le mot revient exactement à sa place, avec tout ce qu'il avait avant. Le bandeau disparaît dès que vous quittez votre espace : au-delà, il faudra recréer le mot à la main.

12. Les contextes, ses mondes

Les boutons du haut de son écran sont ses mondes : Maison, Extérieur, J'ai mal. Dans l'onglet « Les mots », le repli **Gérer les contextes** permet d'en créer un, de le renommer, de le supprimer, et surtout de lui donner une image.



Les mondes, en haut de l'écran de l'enfant.




L'image compte plus qu'on ne croit

L'enfant ne lit pas. Un contexte sans image n'est qu'un mot écrit en haut de son écran, qu'il ne peut pas reconnaître. Dès qu'un bouton porte une image, le nom disparaît et le dessin parle tout seul.

Cinq contextes au maximum : au-delà, leurs boutons ne tiennent plus en haut de l'écran. Un monde dont aucun mot n'est encore montré n'a pas de bouton : il apparaîtra le jour où vous en révélez un.

13. L'écran « J'ai mal »

Ce monde porte **une case par partie du corps** : la tête, le cou, le ventre, le dos, le bras, la main, la jambe, le pied, les fesses, le zizi. L'enfant touche celle qui lui fait mal, et la tablette le dit.

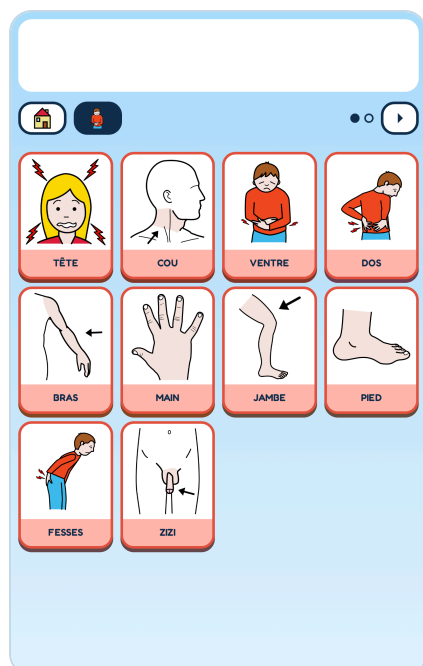


Page 1 : les parties du corps.



Page 2 : ce qui ne se montre pas sur un corps.

La seconde page porte les yeux, les oreilles, la bouche, les dents, le doigt, la bosse, et trois mots pour appeler à l'aide, demander un câlin ou le docteur.

Il existe une autre façon de montrer où on a mal : deux corps dessinés, de face et de dos, où le doigt se pose directement sur l'endroit. C'est l'interrupteur « Montrer la douleur sur un corps », dans l'onglet La tablette. Les mêmes mots, les mêmes voix, seule la forme change. L'application a d'abord été livrée ainsi, puis les corps ont été éteints parce qu'ils faisaient peur à l'enfant. Rallumez-les si un jour ils lui parlent mieux.

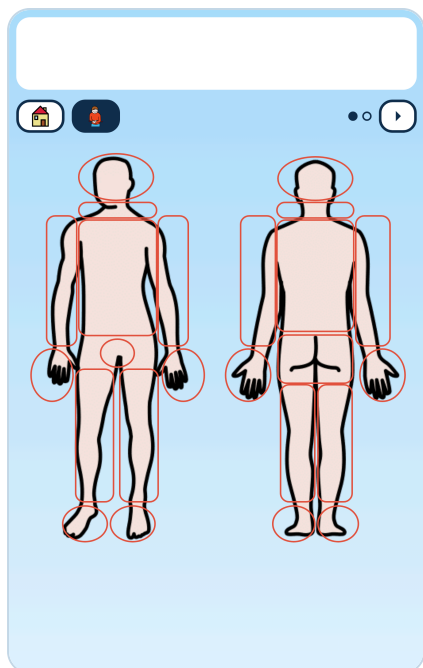


Le même écran, les corps allumés. À l'ouverture, les endroits qu'il peut toucher s'allument deux secondes puis s'effacent, pour qu'il voie que le dessin répond sans en rester encombré.

Les voix de ces deux pages ne sont pas encore enregistrées : pour l'instant c'est la voix de synthèse de la tablette qui les dit, et elle sonne différemment du reste. Vous pouvez y mettre la vôtre comme sur n'importe quel autre mot (chapitre 8).

14. Changer de page

Un monde peut tenir sur plusieurs pages. Les flèches sont en haut à droite, entre les deux ronds qui disent où l'on est.

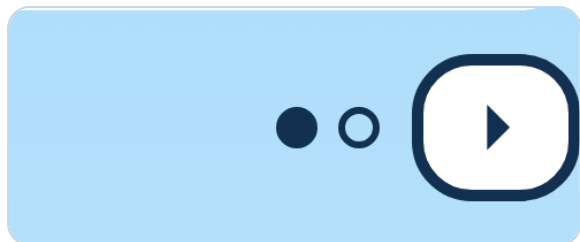

L'enfant peut aussi **faire glisser son doigt** sur la grille, de droite à gauche, pour tourner la page. Un glissement de travers ne compte pas, et un appui qui a glissé ne dit pas le mot : la tablette fait la différence entre montrer et tourner.

Les flèches n'apparaissent que si le monde a plus d'une page. La place leur reste réservée, pour que la grille ne bouge pas d'un monde à l'autre.

15. Enchaîner les mots

Normalement, chaque mot remplace le précédent en haut de l'écran.

L'enchaînement les garde les uns après les autres, pour composer une petite phrase.

1 Onglet **Réglages**.

2 Cochez « **Garder les mots les uns après les autres** ».

3 **Terminé**.



La flèche retire le dernier mot, la croix efface tout.

Trois mots posés à la suite.

Un appui sur la suite de mots la fait relire en entier. Les mots posés ne sont pas toujours ceux écrits sur les cases : BOIRE pose « biberon », PROMENADE pose « promener », pour que la phrase se tienne. Ce mot-là se règle dans

Modifier, au repli « Enchaîner ce mot avec un autre ».

Six mots au maximum

C'est un choix, pas une limite technique. L'adulte modélise trois à six mots quand L'enfant en produit un ou deux : au-delà, la phrase cesse d'être un modèle qu'il peut reprendre. Le septième mot est refusé sans que la phrase bouge.

Pendant l'enchaînement, votre rangée d'entrée se réduit à une bande d'un centimètre de chaque côté de la suite de mots. Le reste de la rangée appartient à l'enfant.

16. Le volume et l'appui

Onglet **Réglages**, tout en haut.

Le volume

Bas **Normal** **Fort**

Réglage fin  70 %

Trois niveaux, et une réglette si aucun ne convient.

L'appui

Normal **Appuis assurés** **Appuis très assurés**

Le mot part dès que le doigt quitte la case, sans attente.

L'appui sert si l'enfant effleure les cases sans le vouloir. « Appuis assurés » demande de tenir le doigt un peu plus longtemps avant que le mot parte, « très assurés » davantage encore. Laissez sur « Normal » tant que ça ne pose pas de problème : chaque milliseconde ajoutée est une milliseconde d'attente entre son doigt et le son.

L'écran de l'enfant

☒ **Revenir à l'écran de départ après 30 secondes sans appui**

☒ **Animer la case pendant que son mot est dit**

☐ **Garder les mots les uns après les autres**

L'enfant touche plusieurs cases, elles s'affichent en haut, et il peut se faire relire toute la phrase.

☐ **Montrer la douleur sur un corps**

Coché, « J'ai mal » montre deux corps dessinés, de face et de dos, et le doigt se pose sur l'endroit. Décoché, ce sont des cases comme partout ailleurs, une par partie du corps. Les mêmes mots, les mêmes voix : seule la forme change.

Revenir à l'écran de départ ramène la tablette à son monde habituel après trente secondes sans appui, pour qu'il ne reste pas coincé sur une page.

Animer la case commande le petit mouvement qui répond à son doigt.

17. La forme de la grille

Le nombre de colonnes et de lignes se règle. L'application vous dit la taille que feront les cases, en centimètres, et vous montre un aperçu.

La forme de la grille

Colonnes

-

4


+

Lignes

-

4

+

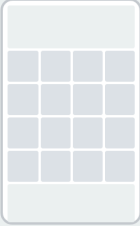

Aujourd'hui, chaque case fait environ 4,8 cm.
Changez les chiffres pour voir ce que donnerait une autre forme. Rien ne bouge sur la tablette avant votre confirmation.

Plus de cases, c'est plus de mots à l'écran mais des cases plus petites. Moins de cases, c'est l'inverse. En dessous de deux centimètres et demi de côté, l'application vous avertit : un doigt d'enfant ne vise pas plus petit.

Changer la grille pour 3 colonnes et 4 lignes ?

22 mots garderont leur place. 5 mots passeront sur 2 pages nouvelles, à la fin de leur contexte, et l'enfant devra en réapprendre les emplacements. Aucun mot ne sera perdu. Faites d'abord une sauvegarde si vous voulez pouvoir revenir en arrière.

Garder la grille actuelle

Changer la grille

Avant de changer, l'application dit exactement ce qui va se passer.

Le réglage le plus lourd de conséquences

Changer la forme de la grille oblige l'enfant à réapprendre l'emplacement de chaque mot qu'il connaît déjà, comme si on rebattait toutes les cartes d'un coup. Un mot qui apparaît ou disparaît ne pose pas ce problème, un changement de grille si.

Aucun mot n'est perdu : ceux qui ne tiennent plus passent sur une page nouvelle, à la fin du monde. Mais faites une sauvegarde avant, pour pouvoir revenir en arrière.

18. Sauvegarder

Tout ce que vous créez vit **uniquement sur cette tablette**. Pas de compte, pas de serveur, personne d'autre n'en a de copie. Si la tablette est perdue, cassée ou réinitialisée, tout disparaît avec elle.

Onglet **Sauvegarde**.

Espace parents Terminé

Les mots Sauvegarde Réglages

Ce qu'il y a sur la tablette
Sur cette tablette : 40 mots, dont 32 visibles · 0 photo et 0 voix de la famille · 2,2 Mo utilisés sur 4,0 Go.
Rien n'a changé depuis votre dernière sauvegarde.

L'application n'est pas installée sur cet appareil. Posez-la sur l'écran d'accueil : tant qu'elle reste dans le navigateur, iPhone et iPad effacent les données des sites qu'on n'ouvre pas pendant une semaine. Enregistrez aussi une sauvegarde.

Mettre à l'abri

Enregistrer une sauvegarde Restaurer une sauvegarde

Imprimer les planches Une feuille par page de mots, à plastifier pour le sac.

Effacer toute la configuration

Sur cette tablette : 40 mots, dont 32 visibles · 0 photo et 0 voix de la famille · 2,2 Mo utilisés sur 4,0 Go.

Ce qu'il y a sur la tablette, en une ligne.

- 1 Appuyez sur **Enregistrer une sauvegarde**. Un fichier est créé, nommé par exemple **mes-mots-2026-09-11.obz**.
- 2 Un compte rendu s'affiche et vous dit exactement ce qui a été sauvegardé. **Lisez-le**. Une sauvegarde qu'on ne vérifie pas est une promesse, pas une sécurité.

- 3 Mettez ce fichier ailleurs que sur la tablette.** Un mail que vous vous envoyez, une clé USB, un espace de stockage en ligne : peu importe, mais pas seulement sur l'appareil qu'on cherche justement à ne pas perdre.

Sauvegarde enregistrée

mes-mots-2026-09-15.obz

Téléchargé le 15 septembre 2026 à 13:50.

Mettez ce fichier ailleurs que sur la tablette : envoyez-le-vous par courriel, ou copiez-le sur un ordinateur ou une clé. Une sauvegarde restée sur l'appareil disparaît avec lui.

- 3 contextes
- 4 pages
- 32 mots visibles sur 40 au total
- 39 images
- 21 sons
- 918 Ko

Fermer

Faites-le après chaque séance où vous avez ajouté ou modifié des mots.
L'application vous le rappellera d'elle-même en quittant votre espace.

Pensez à sauvegarder

La tablette contient 40 mots, et rien n'a été sauvegardé depuis les derniers changements.
Sans fichier de sauvegarde, ils peuvent être perdus.

Plus tard

Enregistrer une sauvegarde

19. Restaurer

Restaurer une sauvegarde demande le fichier, puis **montre d'abord ce qu'il contient à côté de ce qui est sur la tablette**, avec les dates.

Remplacer la configuration de la tablette ?

Cette sauvegarde	Sur la tablette maintenant
15 septembre 2026 à 13:50	• 3 contextes • 4 pages • 32 mots visibles sur 40 • 39 images • 21 sons
• 3 contextes • 4 pages • 32 mots visibles sur 40 • 39 images • 21 sons	

Remplacer effacera la configuration actuelle et la remplacera par celle-ci.

Annuler

Remplacer tout

Vous voyez donc ce que vous vous apprêtez à remplacer avant que quoi que ce soit ne bouge. Rien n'est modifié tant que vous n'avez pas confirmé. Selon le fichier, deux boutons : **Remplacer tout**, et **Ajouter sans rien effacer** quand la sauvegarde apporte des mondes que la tablette n'a pas.


C'est aussi de cette façon qu'on installe la configuration de l'enfant sur une nouvelle tablette : on sauvegarde depuis l'ancienne, on restaure sur la nouvelle.

Un format qui ne vous enferme pas

Le fichier .obz est un standard partagé par plusieurs logiciels de communication. Si un jour cette application n'est plus maintenue, ce fichier s'ouvre ailleurs, et l'enfant ne perd pas ses mots.

20. Imprimer les planches

Batterie vide, tablette oubliée à l'école ou cassée : la parade est une grille imprimée et plastifiée dans le sac. Le bouton [Imprimer les planches](#), dans l'onglet Sauvegarde, sort **une feuille par page de mots**, dans l'ordre où L'enfant les voit.

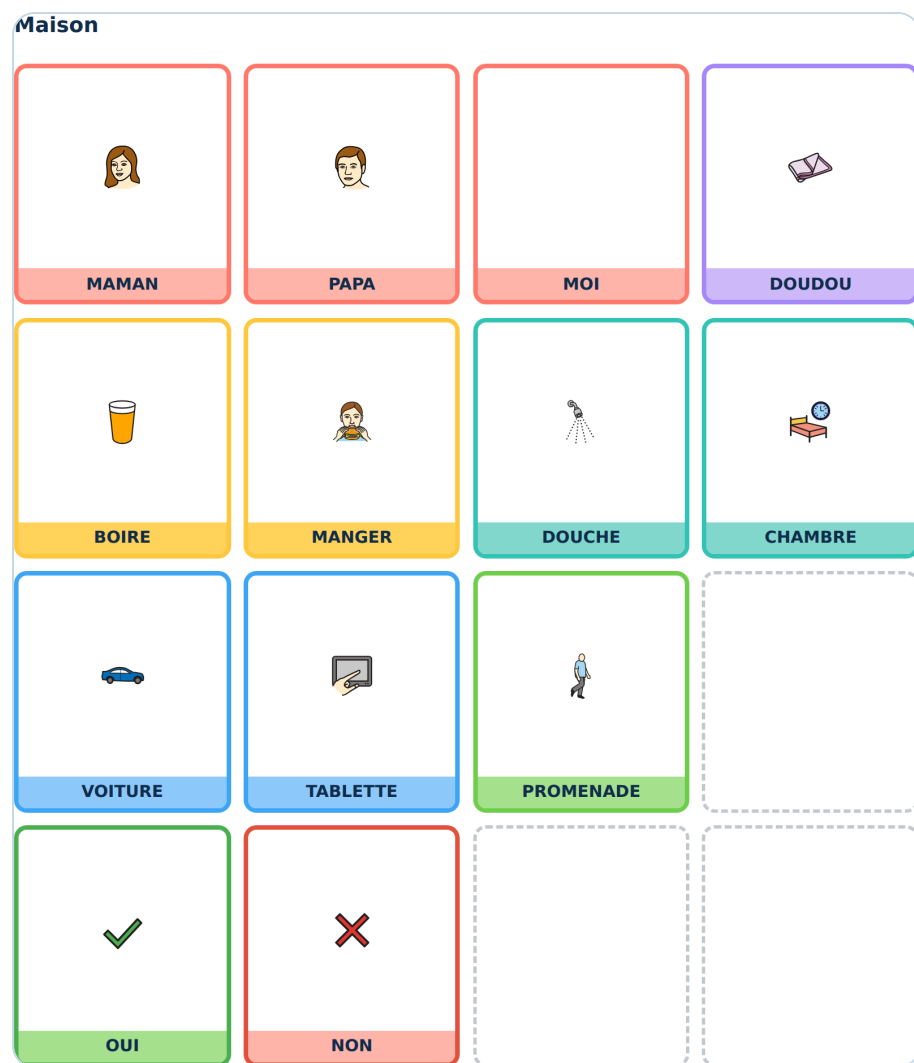

Le papier est le miroir exact de son écran : seuls les mots montrés y figurent, chacun à sa place, les emplacements encore cachés restant vides. C'est ce qui lui permet de montrer sur le papier ce qu'il montre d'habitude sur la tablette, sans rien réapprendre.

Une page dont aucun mot n'est encore montré ne s'imprime pas : elle ne donnerait qu'une feuille de cases vides.

21. Mettre à jour

L'application

Version du 2026-09-15 11:49

[Vérifier les mises à jour](#)

En bas de l'onglet [Réglages](#), la date de la version installée et un bouton [Vérifier les mises à jour](#). Quand une nouvelle version est prête, un bouton [Redémarrer maintenant](#) apparaît : c'est lui qui l'installe.

Une mise à jour ne touche jamais à votre travail

Les mots que vous avez ajoutés, les photos, les voix enregistrées et les réglages restent exactement comme ils sont. C'est une garantie de l'application, pas une habitude.

22. Tout effacer

Tout en bas de l'onglet Sauvegarde, séparé du reste :

Effacer toute la configuration .

Effacer toute la configuration ?

Tout sera effacé : les mots ajoutés, les photos, les voix enregistrées et les réglages. La tablette repartira de la configuration d'origine, et rien ne pourra être récupéré. Faites d'abord une sauvegarde si vous voulez pouvoir revenir en arrière.

Annuler

Effacer définitivement

La tablette repart de la configuration d'origine. Les mots ajoutés, les photos, les voix enregistrées et les réglages sont perdus, ainsi que la liste de ce qu'il a dit. **Rien ne pourra être récupéré**, sauf par un fichier de sauvegarde fait avant.

Ce bouton ne sert que dans deux cas : donner la tablette à quelqu'un d'autre, ou repartir de zéro volontairement. Dans tous les autres cas, ce que vous cherchez est ailleurs dans cette notice.

23. Quand quelque chose cloche

Un bandeau rouge en haut de votre espace

Votre dernier changement n'a pas pu être enregistré : la tablette manque de place, ou son stockage a refusé d'écrire. Le changement est affiché mais il disparaîtra au prochain démarrage. Refaites-le. S'il échoue encore, redémarrez la tablette, et faites de la place en supprimant des photos ou des vidéos étrangères à l'application.

« Le système peut effacer vos réglages »

Ce message, dans l'onglet Sauvegarde, veut dire que la tablette s'autorise à faire de la place toute seule si elle en manque, et que vos réglages sont alors dans les premiers à partir. La vraie protection est le fichier de sauvegarde : faites-en un après chaque séance et gardez-le ailleurs. Évitez aussi d'effacer les données du navigateur, et les nettoyages automatiques.

L'autre message, « Le système garde vos réglages », veut dire que tout va bien et qu'il n'y a rien à faire.

Le mot ne part pas quand il touche

Vérifiez le réglage de l'appui (chapitre 16) : en « Appuis très assurés », un effleurement ne suffit pas. Vérifiez aussi qu'il ne fait pas glisser son doigt, ce qui tourne la page au lieu de dire le mot.

On n'entend rien

Le volume de l'application est indépendant de celui de la tablette : regardez les deux (chapitre 16). Sur certaines tablettes, le tout premier mot d'une séance met une fraction de seconde de plus à venir, les suivants sont immédiats.

Je suis coincé sur l'écran de l'enfant

Réappuyez trois secondes sur la première rangée. Si vous venez de vous tromper dans l'addition, il faut attendre vingt secondes. Si l'enchaînement est allumé, visez le centimètre blanc à gauche ou à droite de la suite de mots.

24. Préparer la tablette

Ces réglages ne sont pas dans l'application : ils sont dans la tablette elle-même, et le chemin exact dépend du modèle. À faire une fois.

Installer l'application	Ouvrez l'adresse dans le navigateur, puis « Ajouter à l'écran d'accueil ». Elle s'ouvre alors en plein écran, sans barre d'adresse, et fonctionne sans internet.
Épingler l'écran	Empêche l'enfant de sortir de l'application par accident. Cherchez « épinglage d'écran » dans les réglages de sécurité de la tablette.
Verrouiller la rotation	En portrait. L'écran est pensé pour ce sens, et une bascule en pleine phrase déroute.
Désactiver la veille	Ou la repousser au maximum. Un écran qui s'éteint entre deux mots casse l'échange.
Couper les notifications	Elles passent devant l'application et volent l'appui suivant.
Vérifier le son dehors	En voiture, dans la cour, à l'école. Si le haut-parleur ne suffit pas, une petite enceinte Bluetooth règle le problème.

Une fois par mois, trois minutes

Ouvrez votre espace, faites une sauvegarde, envoyez-vous le fichier. C'est la seule habitude qui compte vraiment.